

Actualización de seguridad para ZEISS IOLMaster 5.5/IOLMaster 500 ("PrintNightmare")



Actualización de seguridad para ZEISS IOLMaster 5.5/IOLMaster 500 ("PrintNightmare")

Tenga en cuenta que el presente documento no sustituye al manual de usuario que se incluye con el suministro del equipo.

Acerca de la actualización

"PrintNightmare" es el nombre que recibe un fallo de seguridad que afecta a los equipos que funcionan con sistemas operativos de Microsoft Windows. En palabras de Microsoft, "existe una vulnerabilidad de ejecución remota de código cuando el servicio Windows Print Spooler realiza incorrectamente operaciones de archivos privilegiados. Un atacante que aproveche con éxito esta vulnerabilidad podría ejecutar código arbitrario con privilegios de SISTEMA. Un atacante podría instalar programas, ver, cambiar o eliminar datos, o crear nuevas cuentas con derechos de usuario completos".

"PrintNightmare" no afecta ni a la seguridad ni al funcionamiento de ZEISS IOLMaster 5.5/IOLMaster 500. Sin embargo, le facilitamos una actualización de seguridad (parche) para el equipo destinada a solucionar el fallo de seguridad "PrintNightmare".

Dispositivo de almacenamiento necesario

Para descargar la actualización antes de instalarla, necesitará un lápiz de memoria USB con una capacidad de almacenamiento de al menos 1 GB.

Preparación

- Descargue el archivo siguiente y guárdelo directamente en el directorio raíz de la memoria USB:
- Zeiss-IOLMaster500-CVE-2021-34527-Patch.upt


Cómo se instala la actualización de ZEISS IOLMaster 5.5/IOLMaster 500

El procedimiento de instalación puede diferir ligeramente del que se presenta en estas instrucciones según el sistema operativo que utilice. Los pasos de instalación que se detallan en estas instrucciones se refieren a sistemas con Windows 10.


En total, la instalación de la actualización dura unos 45 minutos. Proceda como sigue para instalar la actualización:




1. Retire todas las memorias USB de IOLMaster.
2. Conecte la memoria USB en la que se encuentre la actualización descargada a IOLMaster.

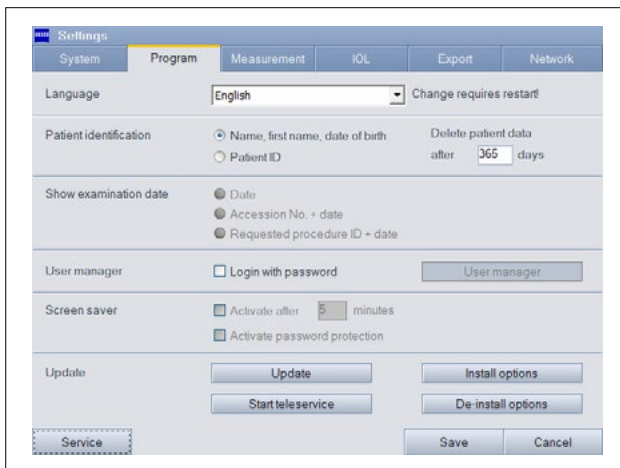

3. Haga clic en "Settings" > "Program" > "Update" para iniciar el proceso de actualización.

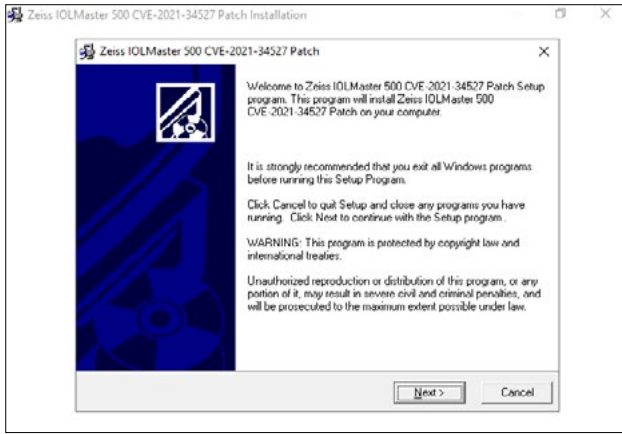


4. Se inicia el asistente de actualización. Esto puede tardar hasta 3 minutos. Tan pronto como aparezca la ventana de al lado, haga clic en "Next".

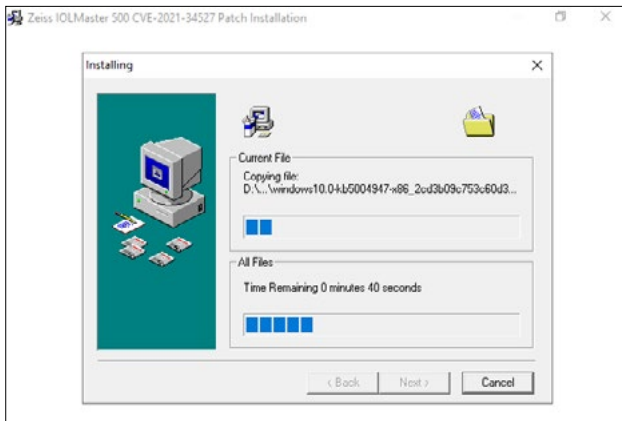


5. Se copian los archivos. Este proceso también puede tardar hasta 3 minutos.


6. La primera parte de la instalación comienza de forma automática.

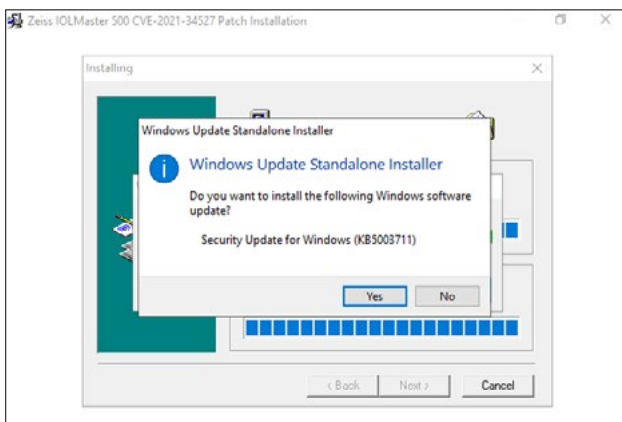

7. Tan pronto como aparezca esta ventana de diálogo, haga clic en "Yes".

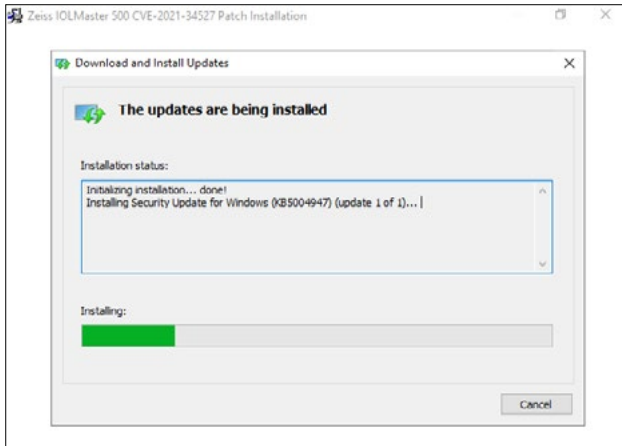


8. Se ejecuta la instalación.

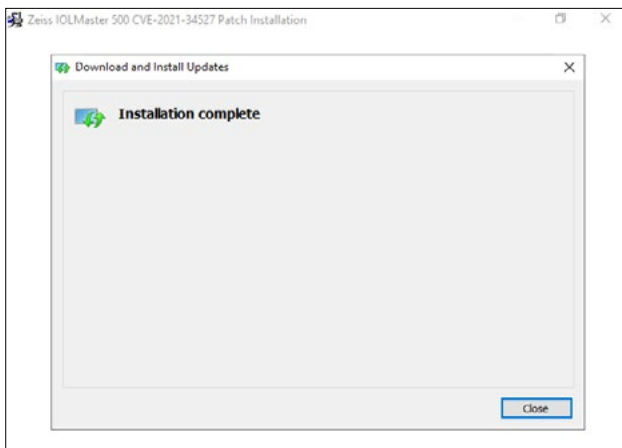


9. Cuando termine este paso, haga clic en "Close".

10. Comienza la segunda parte de la instalación.

11. Repita los pasos 7 a 9.

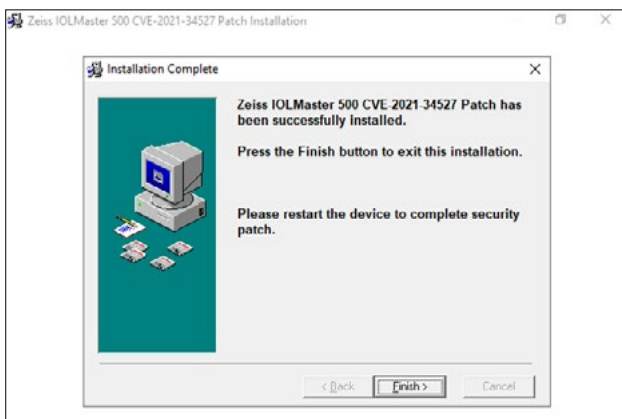


12. Al finalizar la segunda parte de la instalación, haga clic en el botón "Finish".

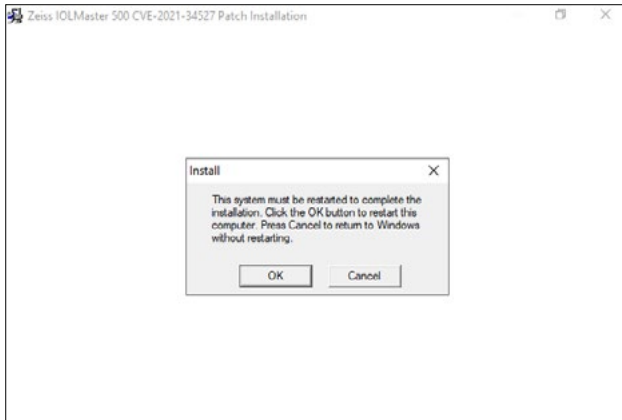

13. El software se ha actualizado por completo. Haga clic en "OK" para reiniciar IOLMaster.

14. El reinicio completo dura unos 10 minutos.

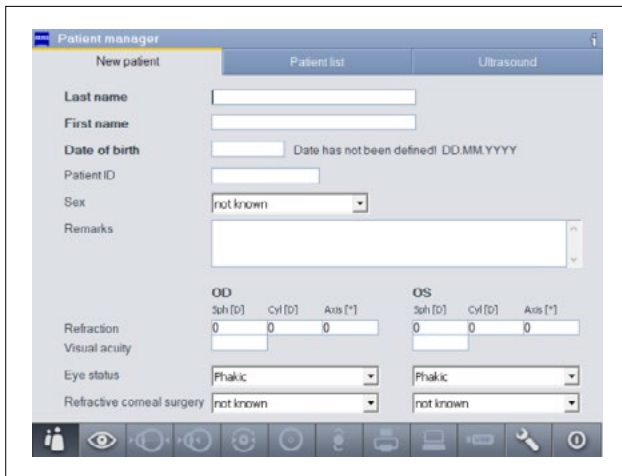

15. Tan pronto como IOLMaster haya vuelto a arrancar por completo y aparezca la ventana "New Patient", habrá concluido correctamente la actualización del software.

16. Ya puede retirar la memoria USB.

Descubra más vídeos de expertos, documentos de ayuda y preguntas y respuestas generales en ZEISS Product Insights.



Página web de
ZEISS Product Insights



Carl Zeiss Meditec AG

Göschwitzer Strasse 51-52

07745 Jena, Alemania

www.zeiss.com/med

info.meditec@zeiss.com

000000-1692-983-AddGA-ES-260821