

Aggiornamento della sicurezza di ZEISS IOLMaster 5.5 / IOLMaster 500 ("PrintNightmare")



Aggiornamento della sicurezza di ZEISS IOLMaster 5.5 / IOLMaster 500 ("PrintNightmare")

Nota: questo documento non sostituisce il manuale utente fornito con il dispositivo.

Informazioni sull'aggiornamento

"PrintNightmare" è il nome di una vulnerabilità della sicurezza che colpisce i dispositivi con sistemi operativi Microsoft Windows. Secondo Microsoft, "esiste una vulnerabilità legata all'esecuzione di un codice remoto quando il servizio Windows Print Spooler esegue in modo improprio operazioni sui file con determinate autorizzazioni. Sfruttando questa vulnerabilità, un utente malintenzionato potrebbe eseguire un codice arbitrario con privilegi di SYSTEM. Questo potrebbe quindi programmare, visualizzare, modificare o cancellare dati, o creare nuovi account con diritti illimitati".

"PrintNightmare" non influisce sulla sicurezza o sulla funzionalità di ZEISS IOLMaster 5.5 / IOLMaster 500. Tuttavia, offriamo un aggiornamento di sicurezza (patch) per il suo dispositivo per colmare la vulnerabilità di sicurezza "PrintNightmare".

Supporto di archiviazione richiesto

Per scaricare l'aggiornamento prima dell'installazione è necessaria una chiavetta USB vuota con almeno 1 GB di capacità di archiviazione.

Preparazione

- Scaricare il seguente file e salvarlo direttamente nella directory principale della chiavetta USB:
 - Zeiss-IOLMaster500-CVE-2021-34527-Patch.upt


Come installare l'aggiornamento di IOLMaster 5.5 / IOLMaster 500

La procedura di installazione può differire minimamente da queste istruzioni a seconda del sistema operativo che si utilizza. Le fasi di installazione descritte in queste istruzioni si riferiscono a sistemi con Windows 10.


In totale, l'installazione dell'aggiornamento richiede circa 45 minuti. Per installare l'aggiornamento, procedere come segue:




1. Rimuovere tutte le chiavette USB da IOLMaster.
2. Collegare la chiavetta USB contenente l'aggiornamento scaricato a IOLMaster.

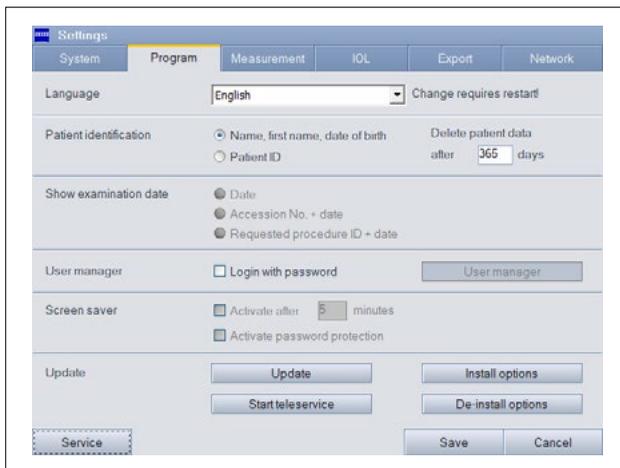


3. Fare clic su "Settings" > "Program" > "Update" per avviare la procedura di aggiornamento.

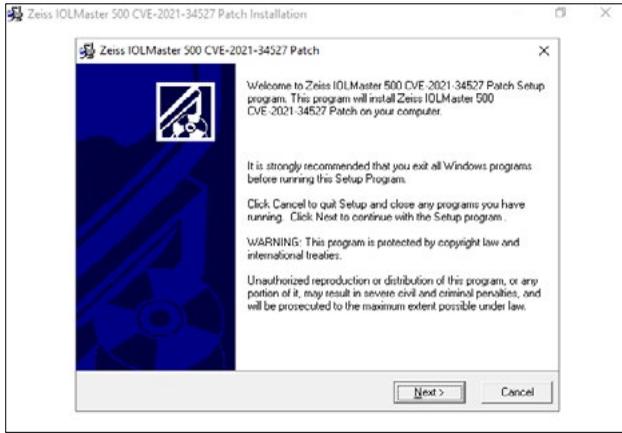


4. Viene avviata la procedura guidata di aggiornamento.
Questa operazione può richiedere fino a 3 minuti. Non appena appare la finestra mostrata qui accanto, fare clic su "Next".

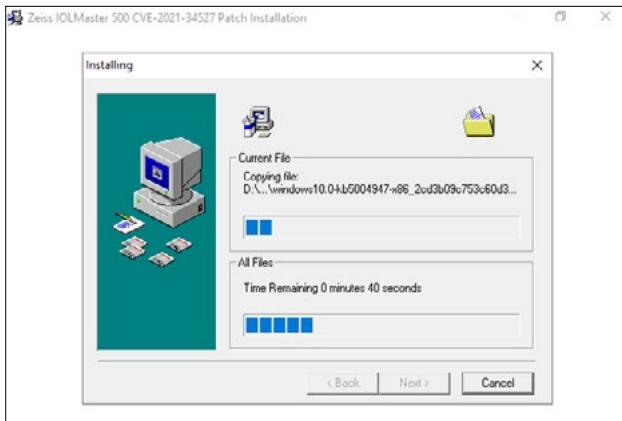


5. I dati vengono copiati. Anche questa operazione può durare fino a 3 minuti.
6. La prima parte dell'installazione inizia automaticamente.

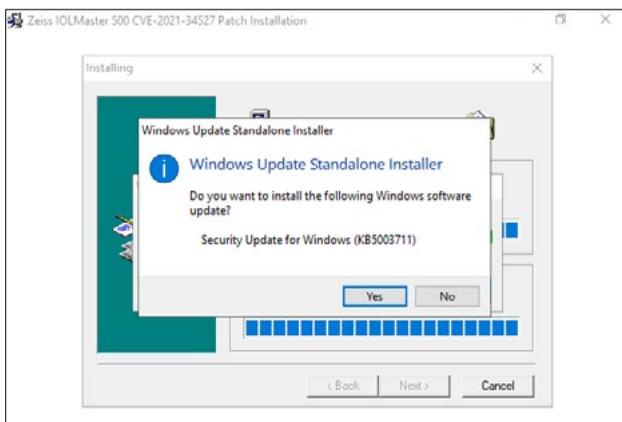

7. Appena appare questa finestra di dialogo, cliccare su "Yes".

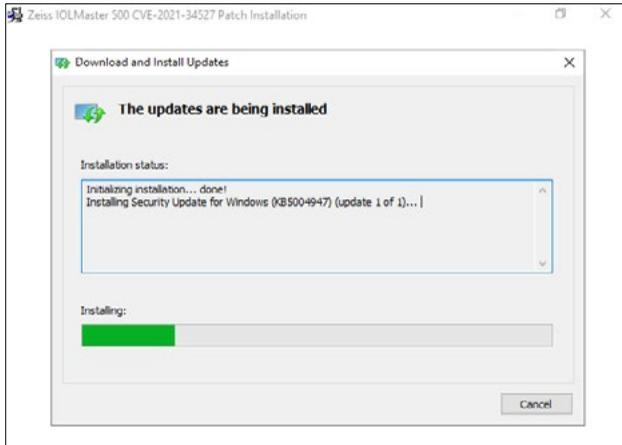


8. L'installazione prosegue.

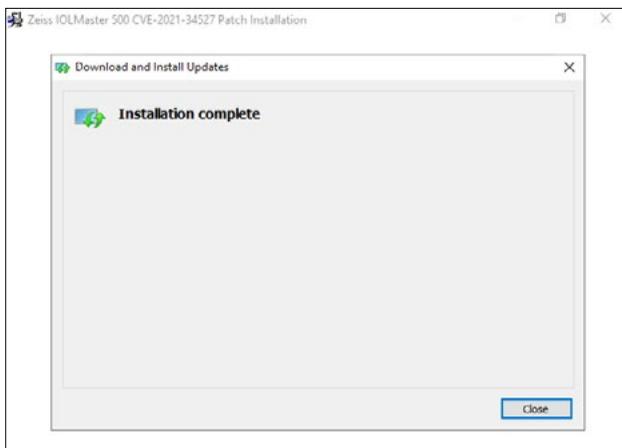


9. Una volta completato questo passaggio, cliccare su "Close".

10. Inizia la seconda parte dell'installazione.

11. Ripetere i passaggi da 7 a 9.

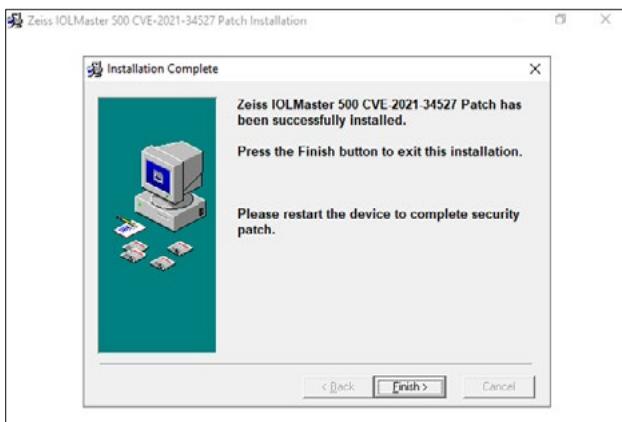


12. Alla fine di questa seconda parte dell'installazione, cliccare sul pulsante "Finish".

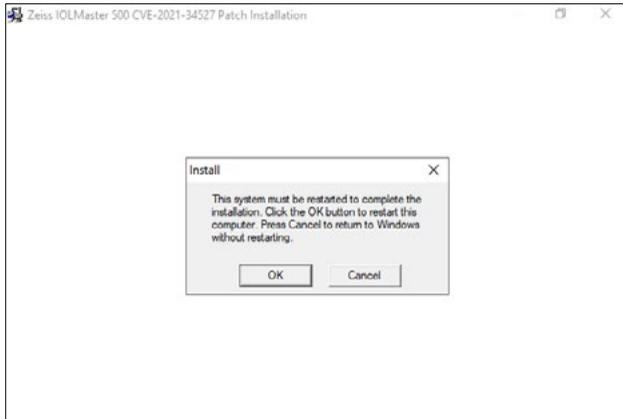

13. L'aggiornamento del software è ora completo. Cliccare su "OK" per riavviare IOLMaster.

14. Il riavvio completo richiede circa 10 minuti.

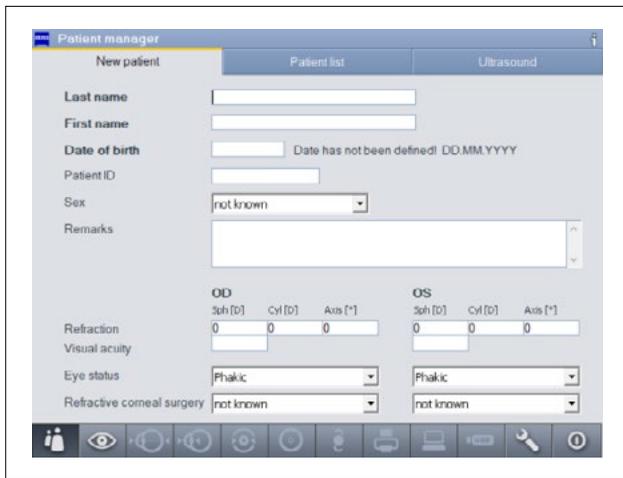

15. Una volta che IOLMaster si è riavviato completamente e viene visualizzata la finestra "New Patient", l'aggiornamento del software è stato completato con successo.

16. È ora possibile rimuovere la chiavetta USB.

Scopri altri video di esperti, documenti di aiuto, domande e risposte generali su ZEISS Product Insights.



**Sito web ZEISS
Product Insights**



Carl Zeiss Meditec AG

Göschwitzer Strasse 51-52

07745 Jena, Germania

www.zeiss.com/med

info.meditec@zeiss.com

000000-1692-983-AddGA-IT-260821