

Aggiornamento della sicurezza di ZEISS IOLMaster 700 ("PrintNightmare")



Aggiornamento della sicurezza di ZEISS IOLMaster 700 (“PrintNightmare”)

Nota: questo documento non sostituisce il manuale utente fornito con il dispositivo.

Informazioni sull'aggiornamento

“PrintNightmare” è il nome di una vulnerabilità della sicurezza che colpisce i dispositivi con sistemi operativi Microsoft Windows. Secondo Microsoft, “esiste una vulnerabilità legata all'esecuzione di un codice remoto quando il servizio Windows Print Spooler esegue in modo improprio operazioni sui file con determinate autorizzazioni. Sfruttando questa vulnerabilità, un utente malintenzionato potrebbe eseguire un codice arbitrario con privilegi di SYSTEM. Questo potrebbe quindi programmare, visualizzare, modificare o cancellare dati, o creare nuovi account con diritti illimitati”.

“PrintNightmare” non influisce sulla sicurezza o sulla funzionalità di ZEISS IOLMaster 700. Tuttavia, offriamo un aggiornamento di sicurezza (patch) per il suo dispositivo per colmare la vulnerabilità di sicurezza “PrintNightmare”.

Supporto di archiviazione richiesto

Per scaricare l'aggiornamento prima dell'installazione è necessaria una chiavetta USB vuota con almeno 2 GB di capacità di archiviazione.

Preparazione

- Scaricare il seguente file e salvarlo direttamente nella directory principale della chiavetta USB:
- 000000-2485-398_Vs01_IOLMaster700UpdateOperatingSystem.upt


Come installare l'aggiornamento di ZEISS IOLMaster 700




1. Spegnerre IOLMaster.
2. Riaccendere IOLMaster.
3. Aprire la schermata di login.
4. Eseguire il login come "Administrator".



5. Collegare la chiavetta USB contenente l'aggiornamento scaricato a IOLMaster.

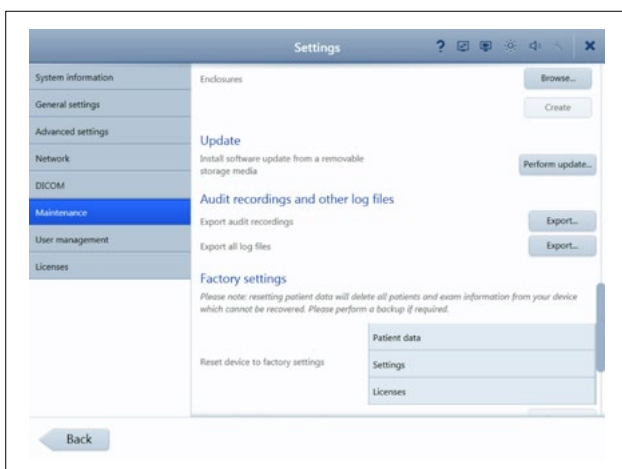


6. Aprire le impostazioni (tramite il simbolo della chiave inglese).
7. Selezionare la voce di menu "Maintenance".
8. Scorrere fino alla sezione "Update".
9. Cliccare su "Perform update".

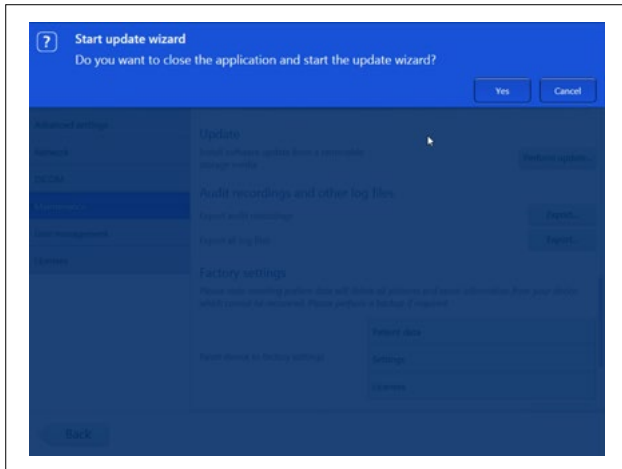

10. Avviare l'aggiornamento cliccando su "Yes" nella finestra pop-up.

NOTA: Questa operazione può durare fino a un minuto.

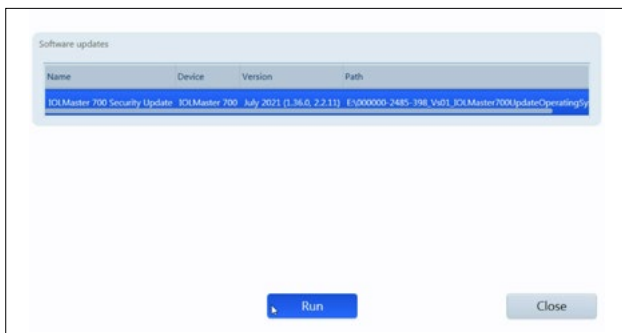


11. Selezionare l'aggiornamento del software dalla lista.

12. Cliccare su "Run".

13. IOLMaster viene riavviato automaticamente.



14. IOLMaster installa quindi l'aggiornamento del software. Questa operazione dura dai 5 ai 30 minuti. Seguire le indicazioni che compaiono sullo schermo. In alcuni casi può essere necessario installare l'aggiornamento del software una seconda volta. In tal caso, IOLMaster vi guiderà anche attraverso questo secondo processo di installazione.

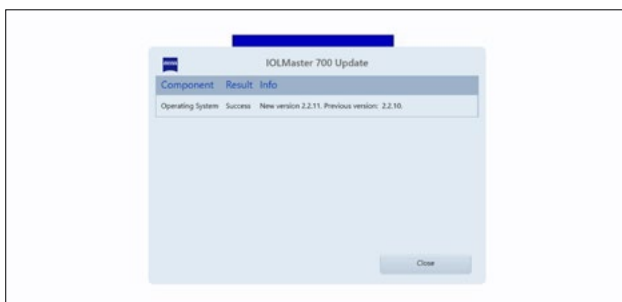

15. Non appena l'aggiornamento è completato, si apre la finestra di dialogo riportata qui accanto. Leggere il messaggio per confermare che il sistema è stato aggiornato con successo.

16. Cliccare su "Close" per concludere il processo di aggiornamento.

17. IOLMaster viene riavviato automaticamente.

18. È ora possibile rimuovere la chiavetta USB.

Scopri altri video di esperti, documenti di aiuto, domande e risposte generali su ZEISS Product Insights.



[Sito web ZEISS
Product Insights](#)



Carl Zeiss Meditec AG

Göschwitzer Strasse 51-52

07745 Jena, Germania

www.zeiss.com/med

info.meditec@zeiss.com

000000-1932-169-AddGA-IT-260821