

ZEISS IOLMaster 700 보안 업데이트 ("PrintNightmare")



Seeing beyond

ZEISS IOLMaster 700 보안 업데이트 ("PrintNightmare")

참고: 이 문서는 장치와 함께 제공된 사용 설명서를 대체하지 않습니다.

업데이트 정보

"PrintNightmare"는 Microsoft Windows 운영 체제로 실행되는 장치에 영향을 미치는 보안 취약점의 이름입니다. Microsoft에 따르면 "Windows Print Spooler 서비스가 특정 권한으로 파일 작업을 부적절하게 수행하는 경우 원격 코드 실행과 관련된 보안 취약점이 발생합니다. 이러한 보안 취약점을 이용하는 공격자는 SYSTEM 권한으로 임의의 코드를 실행할 수 있습니다. 그런 다음 공격자는 프로그램을 설치하고 데이터를 표시, 변경 또는 삭제하거나 무제한 사용자 권한으로 새 계정을 만들 수 있습니다.

"PrintNightmare"는 ZEISS IOLMaster 700의 보안이나 기능에 영향을 미치지 않습니다. 그럼에도 불구하고 "PrintNightmare" 보안 허점이 발생하지 않도록 장치에 대한 보안 업데이트(패치)를 제공합니다.

필요한 저장매체

설치 전에 업데이트를 다운로드하려면 저장 용량이 2GB 이상인 빈 USB 메모리 스틱이 필요합니다.

준비

- 다음 파일을 다운로드하여 USB 스틱의 루트 디렉터리에 직접 저장하십시오.
 - 000000-2485-398_Vs01_IOLMaster700UpdateOperatingSystem.upt


ZEISS IOLMaster 700 업데이트 설치 방법




1. IOLMaster를 끕니다.
2. IOLMaster를 다시 켭니다.
3. 로그인 화면을 불러옵니다.
4. "Administrator"로 로그인합니다.




5. 다운로드한 업데이트가 저장된 USB 스틱을 IOLMaster에 연결합니다.

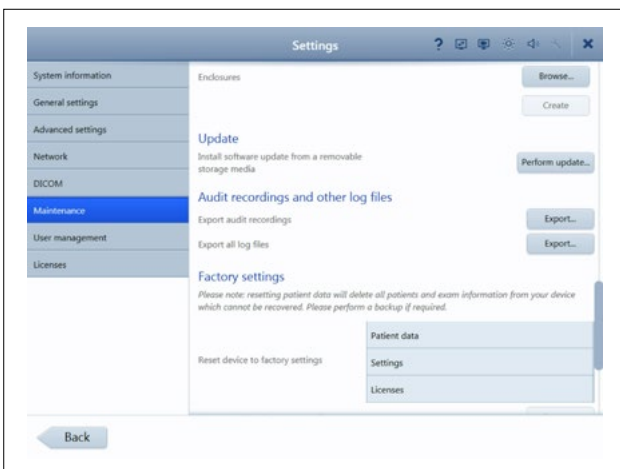

6. 설정을 불러옵니다(렌치 심벌 이용).
7. "Maintenance" 메뉴 화면을 불러옵니다.
8. "Update" 섹션까지 아래로 스크롤합니다.
9. "Perform update"를 클릭합니다.

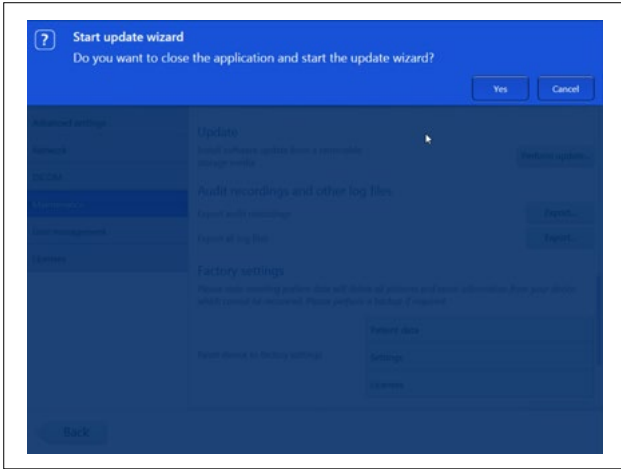


10. 팝업 창에서 "Yes"를 클릭하여 업데이트를 시작합니다.
참고: 이 과정은 최대 1분이 소요될 수 있습니다.

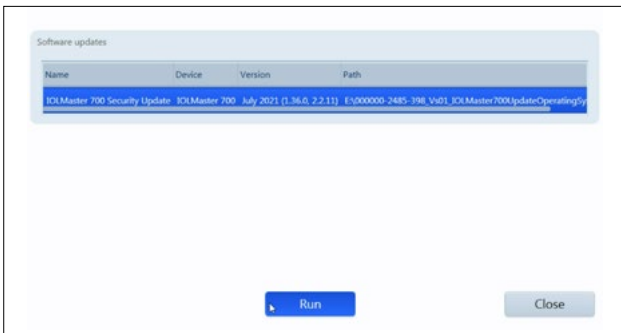

11. 목록에서 소프트웨어 업데이트를 선택합니다.
12. "Run"을 클릭합니다.
13. IOLMaster가 자동으로 다시 시작됩니다.



14. 이제 IOLMaster가 소프트웨어 업데이트를 설치합니다. 이 과정은 5~30분 정도 소요됩니다. 화면에 표시되는 지시를 따르십시오. 경우에 따라 소프트웨어 업데이트를 한 번 더 설치해야 할 수도 있습니다. 이러한 경우 IOLMaster는 이 두 번째 설치 프로세스도 안내합니다.

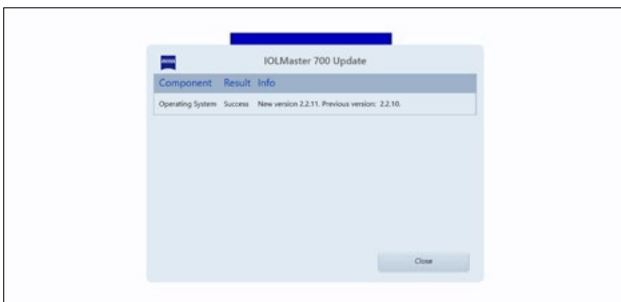

15. 업데이트가 완료되면 그림과 같은 대화 상자가 열립니다. 메시지를 읽고 시스템이 성공적으로 업데이트되었는지 확인합니다.
16. "Close"를 클릭하여 업데이트 프로세스를 종료합니다.
17. 이제 IOLMaster가 자동으로 다시 시작됩니다.
18. 이제 USB 스틱을 다시 제거할 수 있습니다.

ZEISS Product Insights에서 더 많은 전문가 비디오, 도움말 문서, 일반적인 질문과 그에 대한 답변을 확인하십시오.



[ZEISS Product Insights 웹사이트](#)



Carl Zeiss Meditec AG

Göschwitzer Strasse 51-52

07745 Jena, Germany

www.zeiss.com/med

info.meditec@zeiss.com

000000-1932-169-AddGA-KR-260821