

ZEISS IOLMaster 5.5 / IOLMaster 500 **Atualização de segurança (“PrintNightmare”)**



ZEISS IOLMaster 5.5 / IOLMaster 500

Atualização de segurança (“PrintNightmare”)

Observação: este documento não substitui o manual do usuário fornecido com o dispositivo.

Sobre a atualização

“PrintNightmare” é o nome de uma falha de segurança que atinge dispositivos que funcionam com sistemas operacionais Microsoft Windows. Segundo a Microsoft, “Há uma vulnerabilidade de execução de código remoto quando o serviço Windows Print Spooler executa operações de arquivo de forma indevida com determinadas permissões. Um invasor poderia explorar com sucesso esta vulnerabilidade e executar códigos arbitrários com permissões do sistema. O invasor poderia instalar programas, visualizar dados, modificar ou excluir ou criar novas contas com direitos de usuário ilimitados.”

O “PrintNightmare” não prejudica a segurança nem o funcionamento do ZEISS IOLMaster 5.5 / IOLMaster 500. Contudo, oferecemos uma atualização de segurança (Patch) para o seu dispositivo, a fim de solucionar a vulnerabilidade causada pelo “PrintNightmare”.

Mídia de armazenamento necessária

Para fazer o download da atualização antes da instalação, é necessário um dispositivo de memória USB vazio com pelo menos 1 GB de capacidade de armazenamento.

Preparação

- Faça o download dos arquivos a seguir e salve-os diretamente no diretório raiz do dispositivo USB:
 - Zeiss-IOLMaster500-CVE-2021-34527-Patch.upt


Como instalar a atualização no ZEISS IOLMaster 5.5 / IOLMaster 500

O procedimento de instalação pode diferir minimamente destas instruções, dependendo do sistema operacional utilizado. As etapas de instalação descritas nessas instruções referem-se aos sistemas com Windows 10.


A instalação da atualização dura, no total, aproximadamente 45 minutos. Para a instalação, proceda da seguinte forma:




1. Remova todos os dispositivos USB do IOLMaster.
2. Conecte o dispositivo USB em que se encontram as atualizações baixadas no IOLMaster.

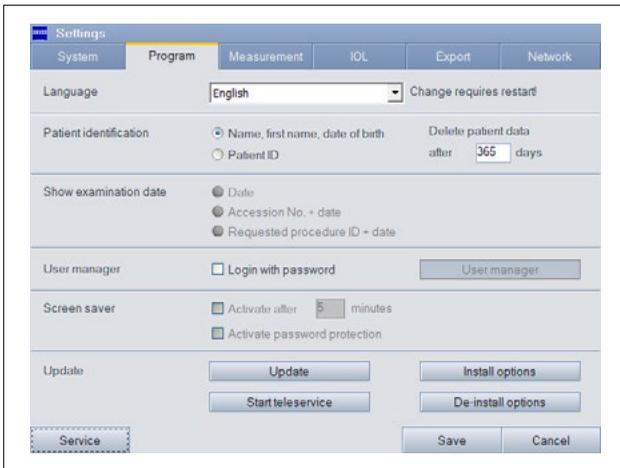

3. Clique em "Settings" > "Program" > "Update", para iniciar o processo de atualização.

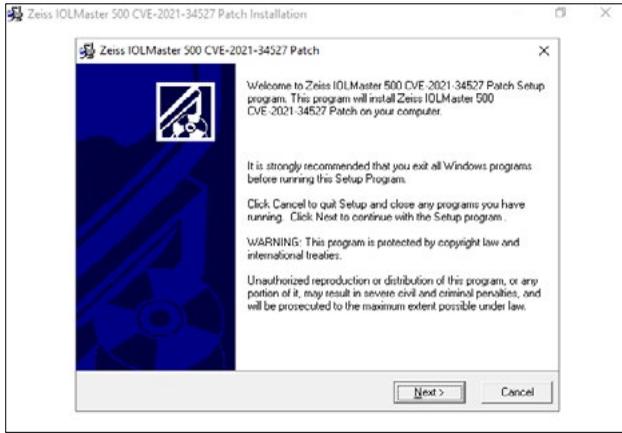


4. O Assistente de atualização é então iniciado. Esse processo pode durar até 3 minutos. Assim que a janela exibida a seguir for exibida, clique em "Next".

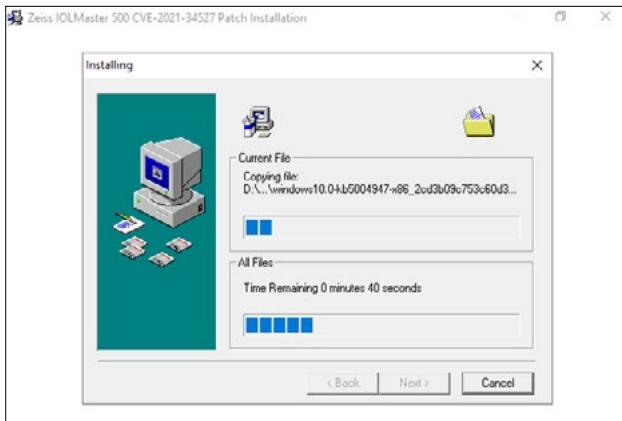


5. Os arquivos são copiados. Esse processo também pode durar aproximadamente 3 minutos.


6. A primeira parte da instalação é automaticamente iniciada.

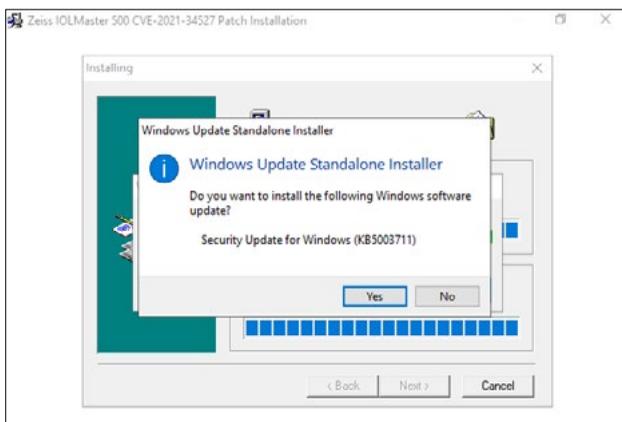

7. Assim que esta janela de diálogo for exibida, clique em "Yes".

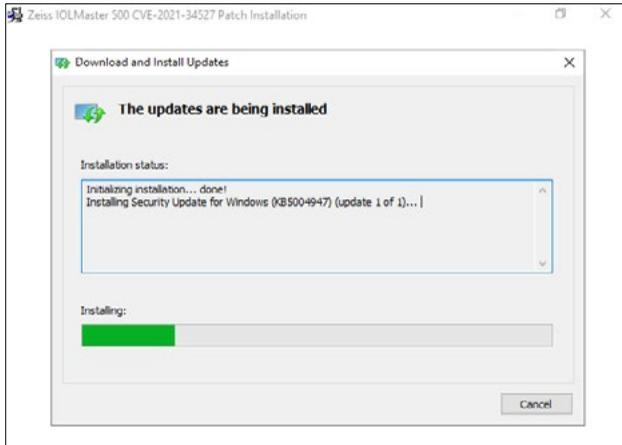


8. A instalação é executada.

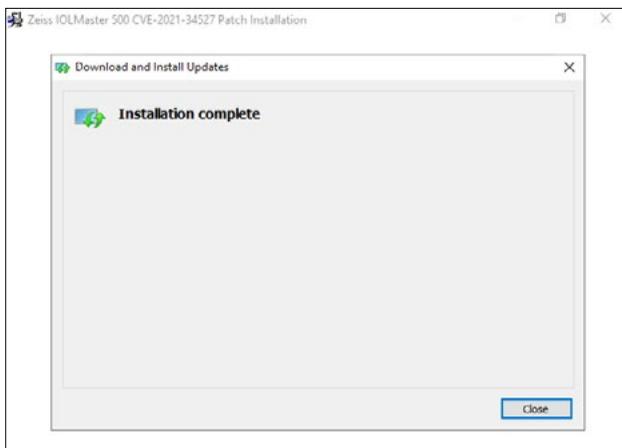


9. Assim que esta etapa for concluída, clique em "Close".

10. Inicia-se a segunda parte da instalação.

11. Repita as etapas 7 a 9.

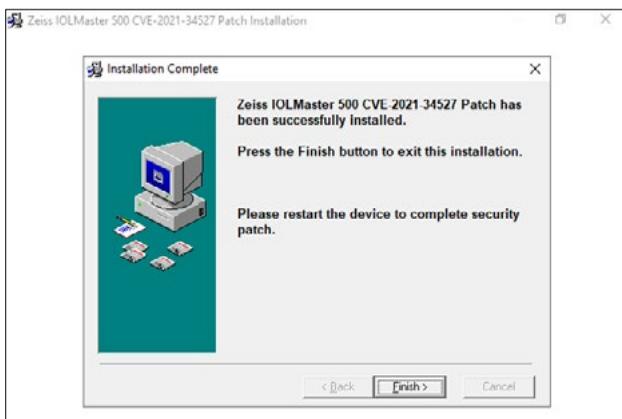


12. Ao final desta segunda etapa de instalação, clique no botão "Finish".

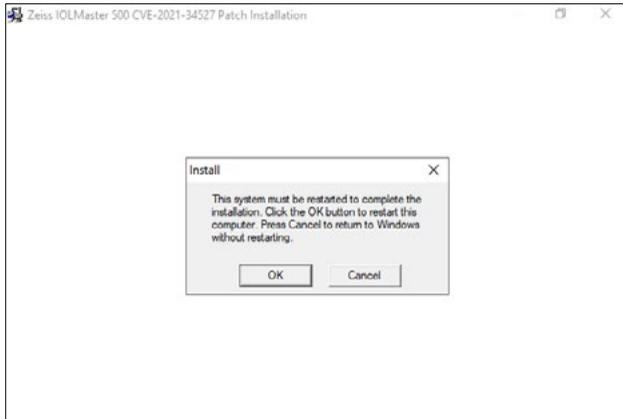

13. Agora, a atualização do software está completa. Clique em "OK" para reiniciar o IOLMaster.

14. O processo de reinicialização completo dura aproximadamente 10 minutos.

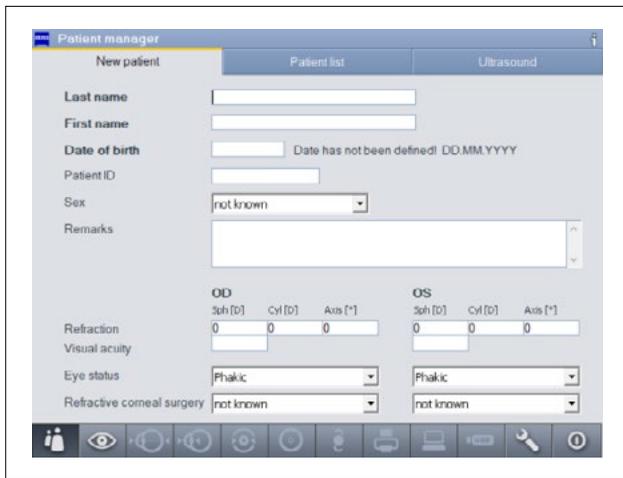

15. Quando o IOLMaster for completamente inicializado e a janela "New Patient" for exibida, a atualização do software terá sido realizada com sucesso.

16. O dispositivo USB pode ser removido.

Explore mais vídeos especializados, documentos de ajuda, perguntas e respostas no ZEISS Product Insights.



A página web de
ZEISS Product Insights



Carl Zeiss Meditec AG

Göschwitzer Strasse 51-52

07745 Jena, Alemanha

www.zeiss.com/med

info.meditec@zeiss.com

000000-1692-983-AddGA-BR-260821