

ZEISS IOLMaster 700 Mise à jour de sécurité (« PrintNightmare »)



Seeing beyond

ZEISS IOLMaster 700 Mise à jour de sécurité (« PrintNightmare »)

Remarque : ce document ne remplace pas le manuel d'utilisation fourni avec l'appareil.

À propos de la mise à jour

« PrintNightmare » est le nom d'une faille de sécurité affectant les appareils exécutant les systèmes d'exploitation Microsoft Windows. Selon Microsoft, « une vulnérabilité d'exécution de code à distance existe lorsque le service Windows Print Spooler effectue incorrectement des opérations de fichier avec certains privilèges. Un attaquant ayant réussi à exploiter cette vulnérabilité pourrait exécuter du code arbitraire avec les privilèges SYSTÈME. L'attaquant pourrait alors installer des programmes, visualiser, modifier ou supprimer des données, ou créer de nouveaux comptes avec des droits d'utilisateur illimités. »

« PrintNightmare » n'affecte pas la sécurité ou la fonctionnalité de ZEISS IOLMaster 700. Néanmoins, nous vous proposons une mise à jour de sécurité (patch) pour votre appareil afin de combler la faille de sécurité « PrintNightmare ».

Support mémoire nécessaire

Pour télécharger la mise à jour avant l'installation, vous avez besoin d'une clé USB vide d'une capacité de stockage d'au moins 2 Go.

Préparation

- Téléchargez le fichier suivant et enregistrez-le directement dans le répertoire racine de la clé USB :
- 000000-2485-398_Vs01_IOLMaster700UpdateOperatingSystem.upt


Comment installer la mise à jour du ZEISS IOLMaster 700




1. Éteignez IOLMaster.
2. Remettez en marche IOLMaster.
3. Accédez à l'écran de connexion.
4. Connectez-vous en tant qu'administrateur.



5. Connectez la clé USB contenant la mise à jour téléchargée à IOLMaster.

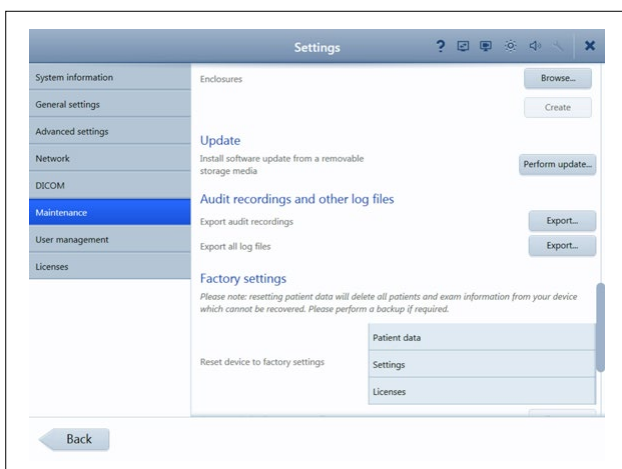


6. Accédez aux paramètres (symbole de la clé à molette).
7. Ouvrez l'option de menu « Maintenance ».
8. Faites défiler l'écran jusqu'à la section « Update ».
9. Cliquez sur « Perform update ».

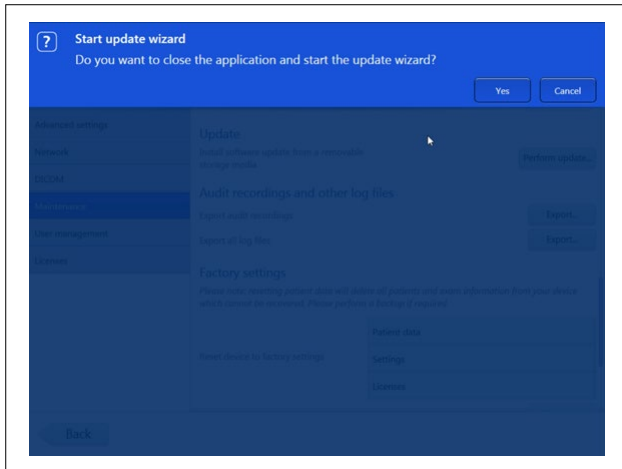

10. Lancez la mise à jour en cliquant sur « Yes » dans la fenêtre qui s'ouvre.


REMARQUE : Cette opération peut durer une minute.

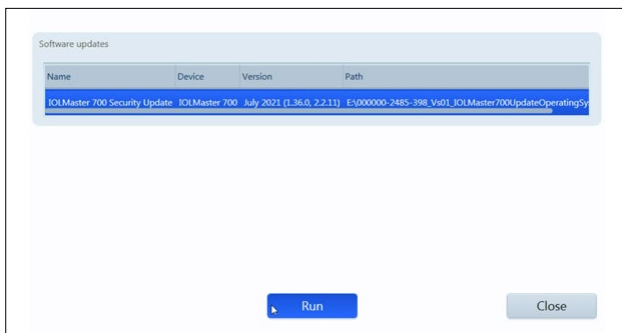


11. Sélectionnez la mise à jour du logiciel dans la liste.

12. Cliquez sur « Run ».

13. IOLMaster est redémarré automatiquement.

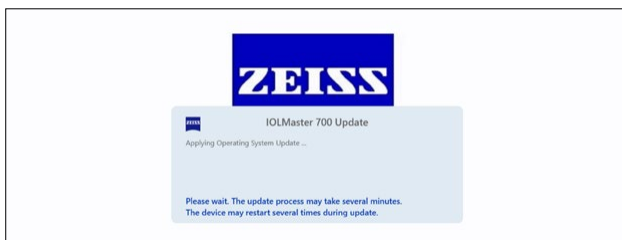

14. IOLMaster installe ensuite la mise à jour du logiciel. Ce processus dure 5 à 30 minutes. Suivez les instructions apparaissant à l'écran. Dans certains cas, il peut être nécessaire d'installer une seconde fois la mise à jour du logiciel. IOLMaster vous guidera alors également à travers ce deuxième processus d'installation.

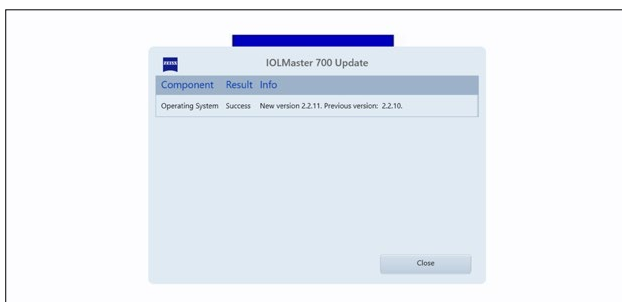

15. Dès que la mise à jour est terminée, la fenêtre de dialogue ci-contre s'ouvre. Veuillez lire le message pour confirmer que la mise à jour a réussi.

16. Cliquez sur « Close » pour terminer le processus de mise à jour.

17. IOLMaster est redémarré automatiquement.

18. Vous pouvez retirer la clé USB.

**Découvrez d'autres vidéos d'experts,
des documents d'aide et des questions
et réponses générales sur
ZEISS Product Insights.**



[Site Web
ZEISS Product Insights](#)



Carl Zeiss Meditec AG

Göschwitzer Strasse 51-52

07745 Jena, Allemagne

www.zeiss.com/med

info.meditec@zeiss.com

000000-1932-169-AddGA-FR-260821